


Klinik- und Krankenhausbetten





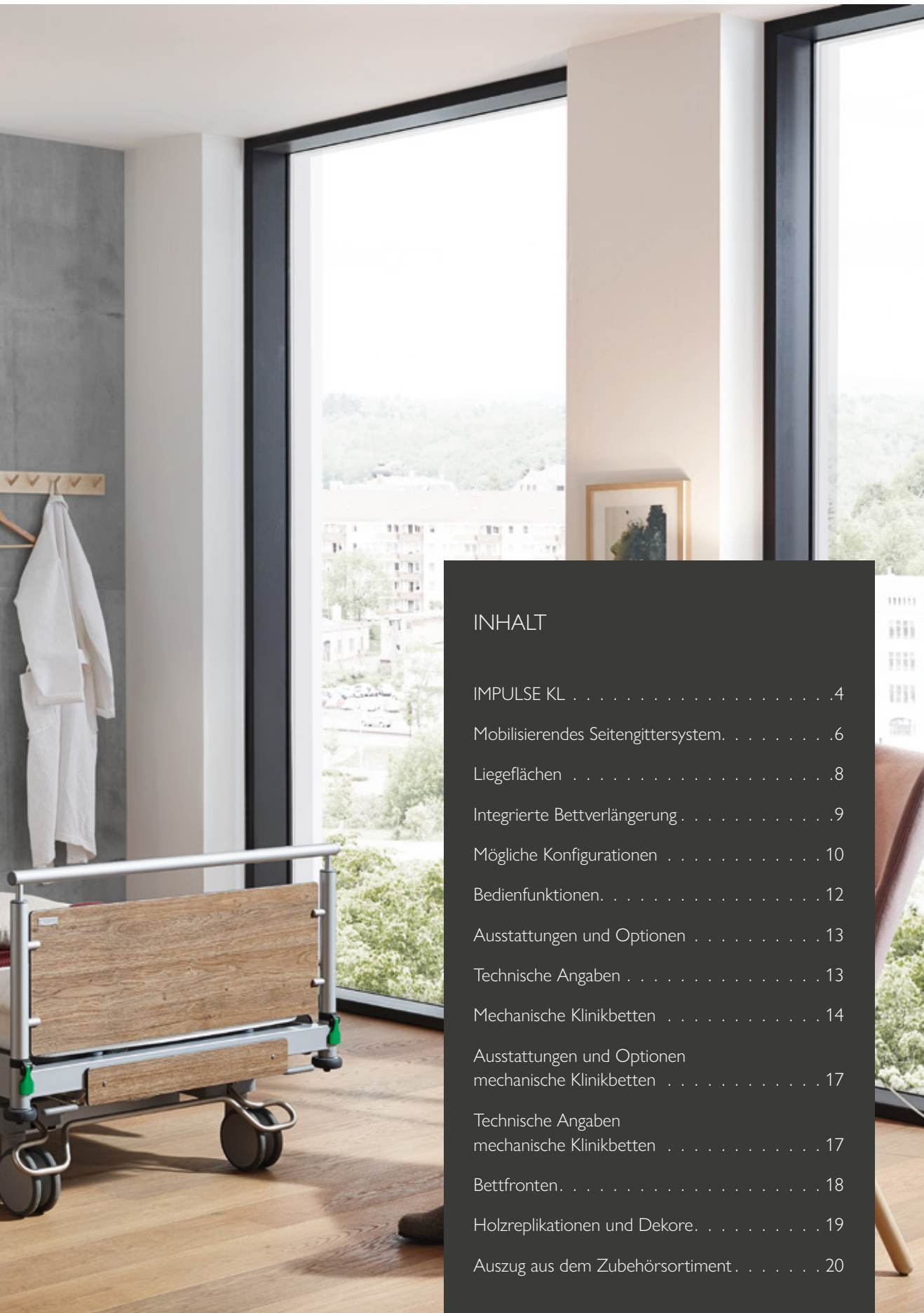

INHALT

IMPULSE KL	4
Mobilisierendes Seitengittersystem.	6
Liegeflächen	8
Integrierte Bettverlängerung.	9
Mögliche Konfigurationen	10
Bedienfunktionen.	12
Ausstattungen und Optionen	13
Technische Angaben	13
Mechanische Klinikbetten	14
Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten	17
Technische Angaben mechanische Klinikbetten	17
Bettfronten.	18
Holzreplikationen und Dekore.	19
Auszug aus dem Zubehörsortiment.	20

IMPULSE KL

Sicherheit. Komfort. Funktion.

Flexibel konfigurierbar und universell für nahezu alle Anwendungsbereiche in Kliniken und Krankenhäusern einsetzbar – das Krankenhausbett IMPULSE KL ist ein vielseitiger Allrounder im Umfeld der stationären Pflege.

Mit umfangreichen Ausstattungsoptionen wie z.B. röntgenfähiger Rückenlehne, zentrierter Lenkrolle zur besseren Manövrierbarkeit, akustischem Bremsalarm, zusätzlichen Handschaltern etc. ist das IMPULSE KL sehr flexibel an die Anforderungen auf Station adaptierbar.

Der universelle Nutzen und die herausragende Produktqualität bieten ökonomische Vorzüge durch langfristige Planungs- und Investitionssicherheit.





Mehr Komfort für Patientinnen und Patienten: Die Komfort-Sitzposition ermöglicht eine bessere räumliche Orientierung. Mittels Matratzenausgleich der Rückenlehne wird der Gesäßbereich wirkungsvoll entlastet.

Pflegekräfte sind täglich hohen körperlichen Beanspruchungen ausgesetzt. Die zügige elektromotorische Höhenverstellung in die Versorgungshöhe bietet eine bessere Ergonomie im täglichen Pflegeprozess. Das stabile, vertikal versenkbare Seitengittersystem ermöglicht die zuverlässige Absicherung der Patientinnen und Patienten und unterstützt bei der Umlagerung.



Schnelle Reaktion im Notfall: Die Schocklagerung ist per Tastenautomatik an der Personalbedienung aktivierbar. Der beidseitig zugängliche, mechanische CPR-Hebel ermöglicht ein sofortiges Absenken der Rückenlehne. Zur besseren Notfallversorgung mit optimaler Zugänglichkeit der Patientinnen und Patienten, sind die Bettfronten am IMPULSE KL mittels Schnellentriegelung in Sekundenschnelle entnehmbar.



Mobilisierendes Seitengittersystem



Mehr Flexibilität in der Anwendung mit dem vertikal versenkbaaren Seitengittersystem am IMPULSE KL: Die stabilen, formschönen Sicherungselemente aus Aluminium bieten mit vier Höhenpositionen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

In der teleskopierbaren Ausführung mit komfortabler Einhandbedienung erfordert das Seitengittersystem keinen seitlichen Platzbedarf und ermöglicht selbst beim Einsatz in kleinen Räumen oder in unmittelbarer Nähe zu Möbeln und Nachtschränken eine gute Erreichbarkeit und einfache Handhabung.

Die durchdachte Konstruktion des kopfseitigen Sicherungselementes unterstützt Patientinnen und Patienten als stabile Mobilisierungshilfe im direkten Zugriff.

Eine im fußseitigen Seitengitter integrierte ISO-Normschiene dient als praktische Zubehöraufnahme, z.B. für Urin- oder Drainagebeutel.



Die intuitive Einhandbedienung am vertikal versenkbaaren Seitengittersystem ermöglicht eine schnelle und leichtgängige Anwendung.

Umlagerungsposition

Ein leicht erhöhter Handlauf bildet in dieser Position eine haptisch wahrnehmbare Begrenzung der Liegefläche und kann einem unbewussten Herausrollen entgegenwirken. Gleichmaßen vereinfacht die Position die Umlagerung indem Patientinnen und Patienten den Handlauf auf Matratzenniveau nutzen, um z.B. in Seitenlage zu verweilen während die Pflegekraft den Rücken säubert oder die Betteneinlage wechselt.



Stabile Mobilitätshilfe

Die mobilitätsunterstützende Seitengitterposition bietet Patientinnen und Patienten einen stabilen Haltegriff im unmittelbaren Aktionsradius und ermöglicht einen sicheren Bettzustieg bzw. -ausstieg.



Absicherung

Das vertikal versenkbare Seitengittersystem verfügt neben der einfachen Schutzhöhe über eine erweiterte Höhenposition, die mittels Teleskopierung des Handlaufs erreicht wird.




Ruheposition

In der Ruheposition der Seitengitter hat das Pflegepersonal ungehinderten Zugang zu Patientinnen und Patienten.



Liegeflächen

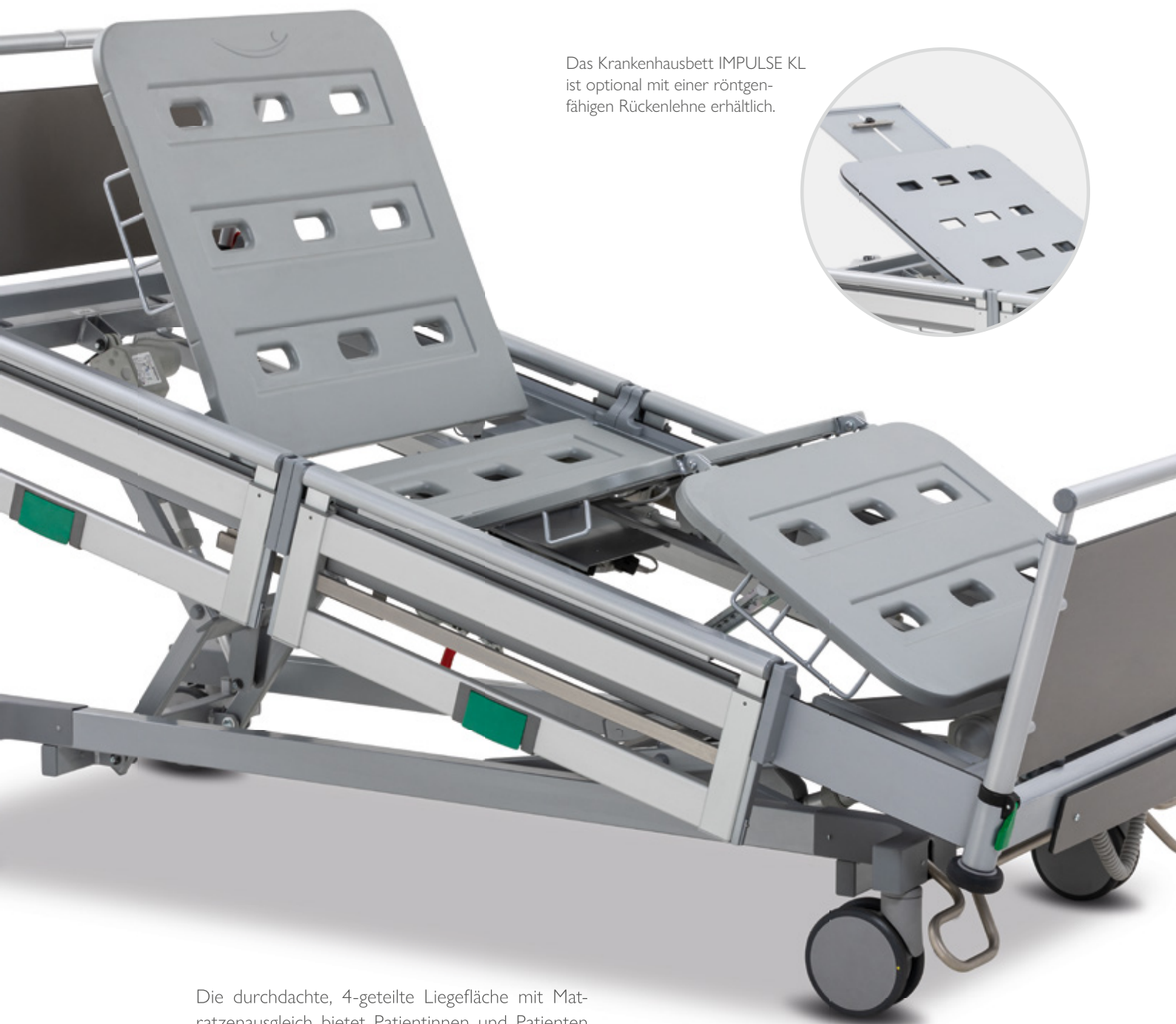

Das Krankenhausbett IMPULSE KL ist optional mit einer röntgenfähigen Rückenlehne erhältlich.

Die durchdachte, 4-geteilte Liegefläche mit Matratzenausgleich bietet Patientinnen und Patienten beste Ergonomie und einen hohen Liegekomfort.

Hochwertige Auflagen aus ABS-Kunststoff ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion und eignen sich besonders für die sensiblen Bereiche in Kliniken und Krankenhäusern.

Betten in Sondermaßen wie z.B. das Schwerlast-Krankenhausbett IMPULSE KL Edition XL sind mit einer stabilen Metallgitter-Liegefläche ausgestattet.

Integrierte Bettverlängerung

Täglich wechselnde Patientinnen und Patienten erfordern Flexibilität von Personal und Produkten. Das Krankenhausbett IMPULSE KL in der Konfiguration mit dem Fahrgestell der Edition 300 verfügt in der Standardausführung über eine integrierte Bettverlängerung zur schnellen, werkzeuglosen Erweiterung der Liegefläche. Diese ist in zwei Stufen um jeweils 10 cm möglich.

Bei der Verlängerung um 20 cm ist ein optional erhältlicher Matratzeinleger erforderlich.



Besonders bedienerfreundlich ist die Schnellentriegelung der Bettverlängerung beim IMPULSE KL Edition 300.



Mögliche Konfigurationen



IMPULSE KL mit Fahrgestell Edition 300

Krankenhausbett mit Universaleigenschaften

Das vielseitige Krankenhausbett IMPULSE KL Edition 300 ist für nahezu alle Bereiche in Kliniken und Krankenhäusern einsetzbar. Mit optional erhältlicher 5. Lenkrolle bietet das Universalbett perfekten Fahrkomfort für häufige Patiententransporte. Die Bettverlängerung ist in dieser Konfiguration mit einer Komfort-Entriegelung ausgestattet (siehe Seite 9).

- Höhenverstellung 36 - 86 cm
- mobilisierendes Seitengittersystem
- Dekor warmgrau dunkel (0755FH)

Merkmale des IMPULSE KL Edition 300

- ABS Hygiene-Kunststoff-Liegefläche (4-geteilt)
- werkzeuglos entnehmbare Bettfronten
- 3-Stufen Bremssystem mit Richtungsfeststellung
- CPR-Funktion elektrisch und manuell
- integrierte Bettverlängerung bis zu 20 cm
- mobilisierendes Seitengittersystem
- ISO-Normschiene beidseitig im Seitengitter und unterhalb der Liegefläche
- gute Rangierfähigkeit durch 150 mm Doppelaufrollen

Mögliche Optionen:

- 5. Lenkrolle für bessere Manövrierbarkeit
- röntgenfähige Rückenlehne
- Bremsalarm
- Sonderbreiten (80 cm / 100 cm)
- freie Dekorauswahl

IMPULSE KL mit Fahrgestell Edition XL

Schwerlast-Krankenhausbett

Das IMPULSE KL mit dem Fahrgestell der Edition XL ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Die robuste, 100 cm breite Metallgitter-Liegefläche sowie spezielle Schwerlast-Antriebe sind für den täglichen Einsatz mit Patientinnen und Patienten bis zu 235 kg Gewicht ausgelegt. 150 mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse ermöglichen eine sichere Mobilität. Die schwenkbaren Alu-Seitengitter halten hohen Belastungen stand und eignen sich gleichermaßen als stabile Mobilitätshilfe.



- Höhenverstellung 36 - 86 cm
- sichere Arbeitslast bis 300 kg
- geteilte, schwenkbare Seitengitter
- Dekor warmgrau dunkel (0755FH)



Merkmale des IMPULSE KL Edition XL

- stabile Metallgitter-Liegefläche (4-geteilt)
- werkzeuglos entnehmbare Bettfronten
- 3-Stufen Bremssystem mit Richtungsfeststellung
- CPR-Funktion elektrisch und manuell
- integrierte Bettverlängerung bis zu 20 cm
- geteiltes, schwenkbares Seitengitter (GS)
- leichte Fahrbarkeit durch 150 mm Doppelaufrollen

Mögliche Optionen:

- 5. Lenkrolle für bessere Manövrierbarkeit
- röntgenfähige Rückenlehne
- Bremsalarm
- freie Dekorauswahl



Bedienfunktionen

Intuitiver Patienten-Handschalter & Personalbedienung



Sicherheit

Eine sichere Handhabung und die intuitive, einfache Bedienung im Pflegeprozess sind Grundvoraussetzung für die Akzeptanz eines Medizinproduktes. Das IMPULSE KL verfügt über ein modernes Bedienkonzept mit Patientenhandschalter und Personalbedienung. Damit ist z.B. die selektive Sperrung einzelner Tasten sowie der Zugriff auf Notfallfunktionen für autorisiertes Pflegepersonal möglich. Für eine einfache und sichere Anwendung und nachhaltige Entlastung im Pflegealltag.



Notfallversorgung

Schnelle Reaktion im Notfall ist mittels der Tastenfunktionen Schocklagerung und CPR am Personalbedienteil jederzeit gegeben. Zusätzlich verfügen alle Krankenhausbetten über eine mechanische CPR-Auslösung der Rückenlehne und entnehmbare Bettfronten für einen schnellen Handlungszugriff.



Flexibilität

Die Personalbedienung findet sowohl an der Bettfront als auch in der Bettzeugablage Platz und ist über eine automatische Sperrfunktion vor unbeabsichtigter Betätigung geschützt. Zusätzlich zum Bedienteil können bis zu zwei Patientenhandschalter am Bett angeschlossen werden. Diese sind in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich.

Ausstattungen und Optionen

IMPULSE KL	Edition 300	Edition XL
Niedrigposition / Einstiegshöhe	36 cm	36 cm
Arbeitshöhe	86 cm	86 cm
Sturzprophylaxe	•	•
Komfort-Sitzposition	•	•
Trendelenburg-Lagerung (sperrbar)	•	•
CPR-Notabsenkung	•	•
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•
Bettverlängerung 10 cm / 20 cm	•	•
Bettzeugablage	•	•
Doppelaufrollen	150 mm	150 mm
Einzelaufrollen	◦	◦
5. Lenkrolle	◦	◦
Zentralbremse	•	•
Einzelradbremse	-	-
Bremsalarm	◦	◦
Seitengitter EVGS mit Einhandbedienung	•	-
Geteiltes, schwenkbares Seitengitter (GS)	◦	•
Seitengitter abklappbar	-	-
Antriebssystem mit Schutzkleinspannung	•	•
Handschalter mit Sperrfunktion	•	•
zusätzlicher Handschalter	◦	◦
Matratzenhalter	•	•
ABS-Liegefläche	•	-
Metallgitter-Liegefläche	◦	•
Metalllamellen-Liegefläche	◦	◦
röntgenfähige Rückenlehne	◦	◦
Universalhaken Iso-Norm	◦	◦
Bettfronten werkzeuglos entnehmbar	•	•
Unterbettbeleuchtung	◦	◦

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

Maße und Gewichte	Edition 300	Edition XL
Liegefläche	200×90 cm	200×100 cm
Außenmaße	216×106 cm	216×116 cm
Sichere Arbeitslast	max. 250 kg	max. 300 kg
Unterfahrbarkeit	17 cm	17 cm
Gesamtgewicht	ca. 120 kg	ca. 160 kg

Mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M Edition 300-P

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P ist speziell auf die hohen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit in der Psychiatrie ausgelegt. Mit speziell gesicherten Komponenten und einer mechanischen Höhenverstellung ist das massive Spezialbett den täglichen Herausforderungen in psychiatrischen Einrichtungen bestens gewachsen. In Abhängigkeit des Einsatzzwecks bestehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. In der Edition 300-P verfügt das IMPULSE KL-M über eine axiale Liegeflächenschwenkung in die Trendelenburg- bzw. Anti-Trendelenburglagerung. Die beidseitig fest montierte ISO-Normschiene mit Fixieraster ermöglicht die Aufnahme von Zubehör und dient gleichermaßen der Befestigung von Fixiergurten.

❶ Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 17
Auswahl Bettfronten: Seite 18

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40-80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung





Die Komfort-Sitzposition wirkt positiv auf die Vitalfunktionen und fördert die Kommunikation.



Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P ist optional mit werkzeuglos montierbaren, durchgehenden Seitengittern erhältlich.



ISO-Normschiene mit Fixierraster zur Befestigung von Gurtsystemen und Zubehör



Integrierte Bettzeugablage



Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



150mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse und Richtungsfeststellung

IMPULSE KL-M Edition 200-P



Einfach höhenverstellbar

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 200-P ist eigens für den Einsatz in der Psychiatrie konstruiert. Die Verstellvarianten dieses mechanischen Klinikbettes beschränken sich auf die Höhenverstellung sowie, bei Konfiguration mit 4-geteilter Liegefläche, auf die selektive Verstellung von Rückenlehne, Oberschenkel- und Unterschenkelauflage.

Die beidseitig angebrachte ISO-Normschiene mit Fixieraster stellt auch bei der Edition 200-P eine praktische Zubehöraufnahme bereit, die gleichermaßen zur Befestigung von Fixiergurten geeignet ist. Die Konfiguration der einzelnen Komponenten ist individuell möglich.

① Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 17
Auswahl Bettfronten: Seite 18



Werkzeuglos montierbare, durchgehende Seitengitter (optional)



Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



125 mm Einzelaufrollen mit Zentralbremse

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse

Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M	Edition 300-P	Edition 200-P
Einstiegshöhe	40 cm	40 cm
Arbeitshöhe	80 cm	80 cm
Komfort-Sitzposition	•	-
Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position	•	-
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•
Bettverlängerung 10 cm / 20 cm	•	•
Bettzeugablage	•	•
Laufrollen	150 mm Doppelaufrollen	125 mm Einzelaufrollen
Zentralbremse	•	•
Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS)	○	○
Werkzeuglos montierbares, durchgehendes Seitengitter (DS)	○	○
2-geteilte Liegefläche	○	○
4-geteilte Liegefläche	•	•
ABS-Liegefläche	○	○
Metallgitter-Liegefläche, fest verschweißt	•	•
Bettfronten werkzeuglos entnehmbar	○	○
Fixierbügel an der Liegefläche	•	•
ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig	•	•
Entnehmbares Höhenpedal mit Sicherung	○	○

• Standard ○ optional


Abweichungen vom Standardumfang sind kundenindividuell möglich.

Technische Angaben mechanische Klinikbetten

Maße und Gewichte	Edition 300-P	Edition 200-P
Liegefläche	90×200 cm	90×200 cm
Außenmaße	107×218 cm	107×218 cm
Sichere Arbeitslast	max. 250 kg	max. 250 kg
Unterfahrbarkeit	13 cm	13 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg

Bettfronten

für Krankenhausbetten

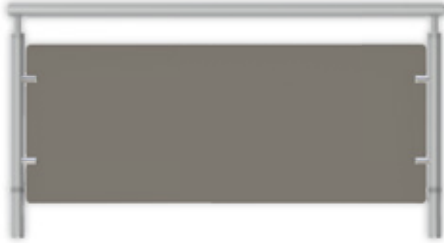

V1000 (pulverbeschichtet)


- Handlauf Rundrohr, entnehmbare Bettfront
- hohe Ausführung mit Öffnung oben
- keine Ausnehmungen in der Füllplatte
- Edelstahlausführung optional



V2000 (pulverbeschichtet)

- Stahlbügel rund, entnehmbare Bettfront
- hohe Ausführung mit Öffnung oben
- keine Ausnehmungen in der Füllplatte


für Psychiatrische Klinikbetten

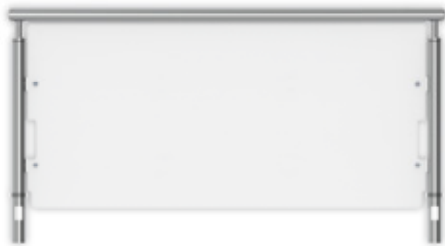

V1120 (verchromt, entnehmbar)

V1121 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

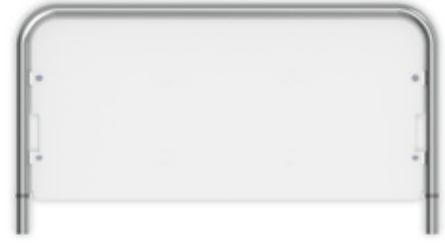

V2120 (verchromt, entnehmbar)

V2121 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)



V1140 (verchromt, entnehmbar)

V1141 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)



V2140 (verchromt, entnehmbar)

V2141 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

Holzreplikationen und Dekore



Ahorn Schlicht

0102 FH




Charles

0538 FH




Tosca

0269 FH




Weiß

0085 FH



Birkengrau

0741 FH



Warmgrau Dunkel

0755 FH



Graphitgrau

0077 FH



Eisblau

0706 FH




Lamar

0023 FH

Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit. Weitere Dekore auf [bettenmalsch.com](https://www.bettenmalsch.com)

Auszug aus dem Zubehörsortiment

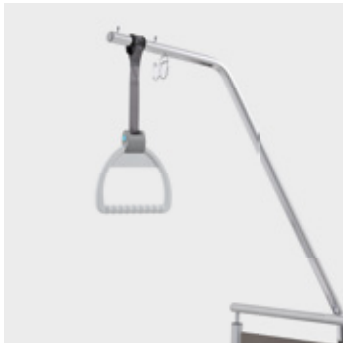

Aufrichter



Infusionsstativ
gerade Kunststoff/Edelstahl
gebogen Kunststoff/Edelstahl



Nachtschrank WK III-M
mit Minibar



Nachtschrank WKIII



Nachtschrank WKI



Server WXL



O₂-Flaschenhalter liegend



O₂-Flaschenhalter senkrecht



Urinflaschenkorb
für DIN-Normschiene



Universalhaken

Unser umfangreiches Zubehör- und Möbelsortiment finden Sie in gesonderten Katalogen.

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post. Alternativ steht die PDF-Datei zum Download unter de.bettenmalsch.com/download bereit.

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

