


Psychiatriebetten





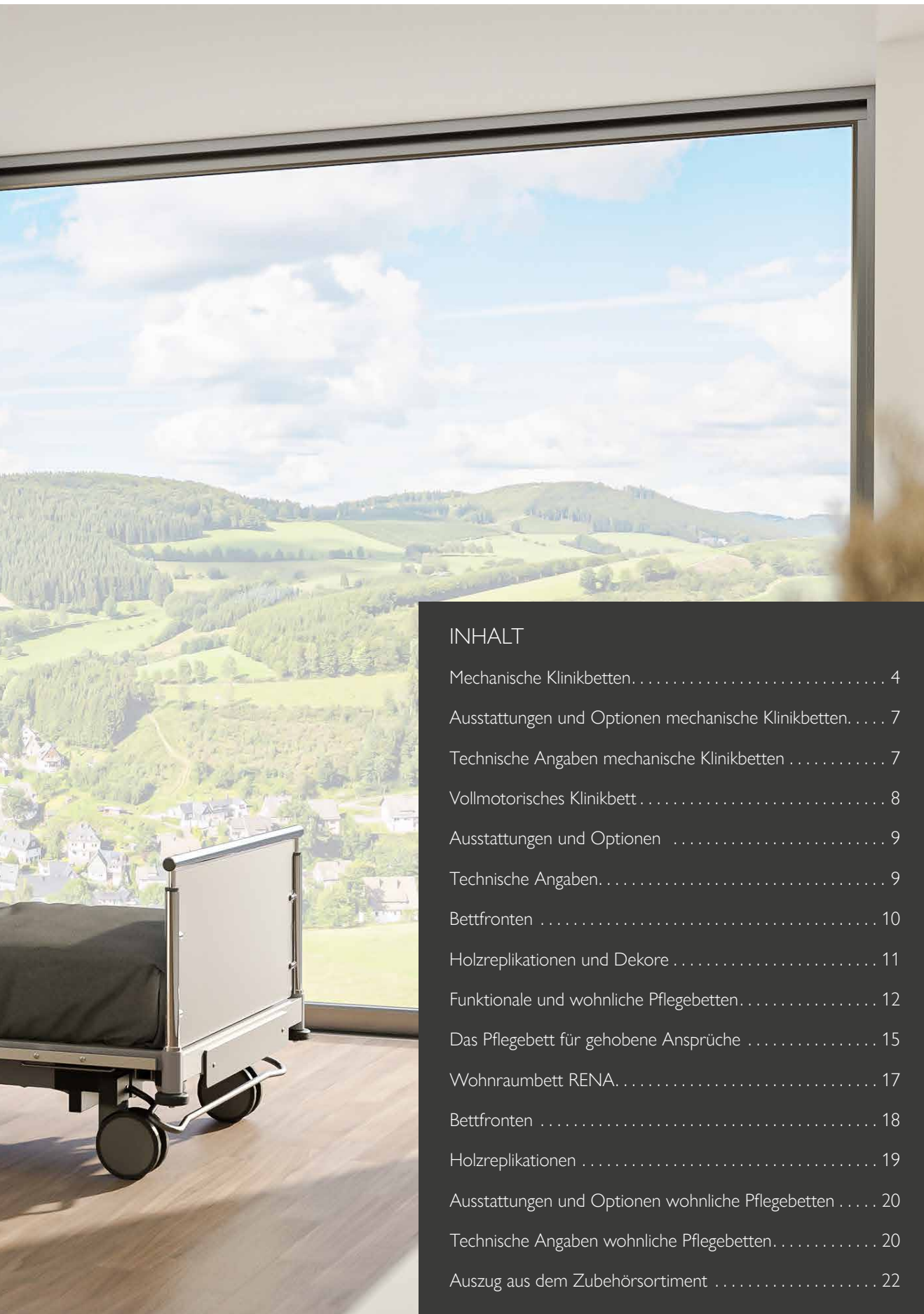

INHALT

| | |
|---|----|
| Mechanische Klinikbetten. | 4 |
| Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten. | 7 |
| Technische Angaben mechanische Klinikbetten. | 7 |
| Vollmotorisches Klinikbett. | 8 |
| Ausstattungen und Optionen. | 9 |
| Technische Angaben. | 9 |
| Bettfronten. | 10 |
| Holzreplikationen und Dekore. | 11 |
| Funktionale und wohnliche Pflegebetten. | 12 |
| Das Pflegebett für gehobene Ansprüche. | 15 |
| Wohnraumbett RENA. | 17 |
| Bettfronten. | 18 |
| Holzreplikationen. | 19 |
| Ausstattungen und Optionen wohnliche Pflegebetten. | 20 |
| Technische Angaben wohnliche Pflegebetten. | 20 |
| Auszug aus dem Zubehörsortiment. | 22 |

Mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M Edition 300-P

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P ist speziell auf die hohen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit in der Psychiatrie ausgelegt. Mit speziell gesicherten Komponenten und einer mechanischen Höhenverstellung ist das massive Spezialbett den täglichen Herausforderungen in psychiatrischen Einrichtungen bestens gewachsen. In Abhängigkeit des Einsatzzwecks bestehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. In der Edition 300-P verfügt das IMPULSE KL-M über eine axiale Liegeflächenschwenkung in die Trendelenburg- bzw. Anti-Trendelenburglage. Die beidseitig fest montierte ISO-Normschiene mit Fixierraster ermöglicht die Aufnahme von Zubehör und dient gleichermaßen der Befestigung von Fixiergurten.

❶ Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 7
Auswahl Bettfronten: Seite 10

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung





Fixierbügel an der Liegefläche

Die Komfort-Sitzposition wirkt positiv auf die Vitalfunktionen und fördert die Kommunikation.



Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P verfügt über die Trendelenburg-Position zur Notfallversorgung.



ISO-Normschiene mit Fixierraster zur Befestigung von Gurtsystemen und Zubehör



Integrierte Bettzeugablage



Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



150 mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse und Richtungsfeststellung

IMPULSE KL-M Edition 200-P



Einfach höhenverstellbar


Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 200-P ist eigens für den Einsatz in der Psychiatrie konstruiert. Die Verstellvarianten dieses mechanischen Klinikbettes beschränken sich auf die Höhenverstellung sowie, bei Konfiguration mit 4-geteilter Liegefläche, auf die selektive Verstellung von Rückenlehne, Oberschenkel- und Unterschenkelauflage.

Die beidseitig angebrachte ISO-Normschiene mit Fixieraster stellt auch bei der Edition 200-P eine praktische Zubehöraufnahme bereit, die gleichermaßen zur Befestigung von Fixiergurten geeignet ist. Die Konfiguration der einzelnen Komponenten ist individuell möglich.

① Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 7
Auswahl Bettfronten: Seite 10



4-geteilte Liegefläche mit selektiver Verstellung von Rückenlehne, Oberschenkel- und Unterschenkelauflage

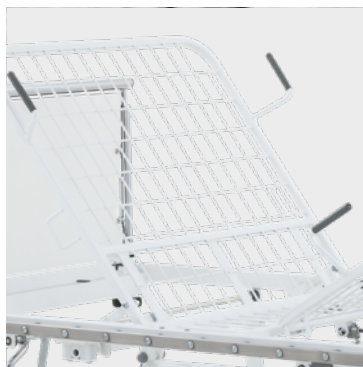

Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



125 mm Einzelaufrollen mit Zentralbremse

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse

Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten

| IMPULSE KL-M | Edition 300-P | Edition 200-P |
|--|------------------------|------------------------|
| Einstiegshöhe | 40 cm | 40 cm |
| Arbeitshöhe | 80 cm | 80 cm |
| Komfort-Sitzposition | • | - |
| Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position | • | - |
| Matratzenausgleich der Rückenlehne | • | • |
| Bettverlängerung 10 cm / 20 cm | • | • |
| Bettzeugablage | • | • |
| Laufrollen | 150 mm Doppelaufrollen | 125 mm Einzelaufrollen |
| Zentralbremse | • | • |
| Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS) | ○ | ○ |
| 2-geteilte Liegefläche | ○ | ○ |
| 4-geteilte Liegefläche | • | • |
| ABS-Liegefläche | ○ | ○ |
| Metallgitter-Liegefläche, fest verschweißt | • | • |
| Bettfronten werkzeuglos entnehmbar | ○ | ○ |
| Bettfronten fest verschraubt | • | • |
| Fixierbügel an der Liegefläche | • | • |
| ISO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig | • | • |
| Entnehmbares Höhenpedal mit Sicherung | ○ | ○ |

• Standard ○ optional

Abweichungen vom Standardumfang sind kundenindividuell möglich.

Technische Angaben mechanische Klinikbetten

| Maße und Gewichte | Edition 300-P | Edition 200-P |
|---------------------|---------------|---------------|
| Liegefläche | 90×200 cm | 90×200 cm |
| Außenmaße | 107×218 cm | 107×218 cm |
| Sichere Arbeitslast | max. 250 kg | max. 250 kg |
| Unterfahrbarkeit | 13 cm | 13 cm |
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg | ca. 130 kg |

Vollmotorisches Klinikbett

IMPULSE KL Edition 400-P

Klinikbett zur Sturzprophylaxe

Die Psychiatrieausführung des bewährten Niedrig-Klinikbetts IMPULSE KL ermöglicht Sturzprophylaxe im psychiatrischen Umfeld. Der stabile Allrounder überzeugt durch flexible Einsatzmöglichkeiten und Beständigkeit der hochwertigen Materialien.

Mit einer Bodenhöhe von nur 30 cm in der Niedrigposition bringt das IMPULSE KL in der Edition 400-P mehr Sicherheit für Patientinnen, Patienten und Pflegepersonal. Das Niedrig-Klinikbett kann sturzgefährdeten Risikogruppen eine Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen bieten.

❶ Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 9
Auswahl Bettfronten: Seite 10



Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 30 - 83 cm
- 30 cm Niedrigposition zur Sturzprophylaxe
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung

Ausstattungen und Optionen


| IMPULSE KL | Edition 400-P |
|---|---------------|
| Niedrigposition | 30 cm |
| Arbeitshöhe | 83 cm |
| Sturzprophylaxe | • |
| Transferposition | • |
| Komfort-Sitzposition | • |
| Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar) | • |
| CPR-Notabsenkung | • |
| Matratzenausgleich der Rückenlehne | • |
| Bettverlängerung 10 cm / 20 cm | • |
| Bettzeugablage | • |
| Doppelaufrollen | 150 mm |
| 5. Rolle | ◦ |
| Zentralbremse mit Richtungsfeststellung | • |
| Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS) | ◦ |
| Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS) | ◦ |
| Entnehmbarer Patientenhandschalter | ◦ |
| Zusätzlicher horizontaler Patientenhandschalter | ◦ |
| 2-geteilte Liegefläche | ◦ |
| 4-geteilte Liegefläche | • |
| ABS-Liegefläche | ◦ |
| Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt | • |
| Bettfronten werkzeuglos entnehmbar | ◦ |
| Bettfronten fest verschraubt | • |
| Bed-Exit System | ◦ |
| Bremsalarm | ◦ |
| Unterbettbeleuchtung | ◦ |

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

| Maße und Gewichte | Edition 400-P |
|---------------------|---------------|
| Liegefläche | 90 x 200 cm |
| Außenmaße | 100 x 206 cm |
| Sichere Arbeitslast | max. 250 kg |
| Unterfahrbarkeit | 13 cm |
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg |


Bettfronten

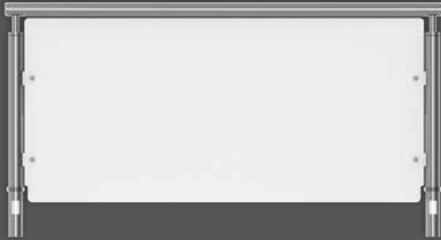

V1110 (verchromt, entnehmbar)

V1111 (verchromt, verschraubt)


- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt

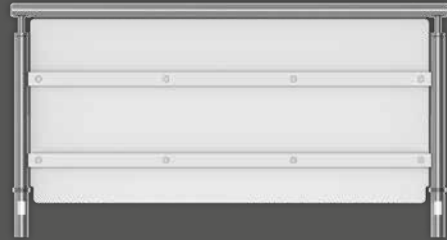

V1130 (verchromt, entnehmbar)

V1131 (verchromt, verschraubt)


- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene

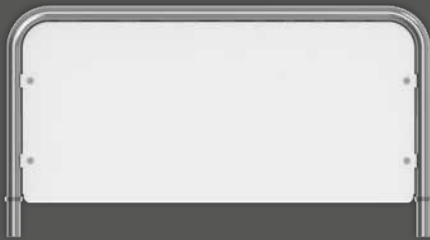

V2110 (verchromt, entnehmbar)

V2111 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt

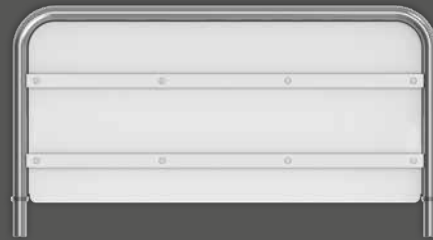

V2130 (verchromt, entnehmbar)

V2131 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene

Holzreplikationen und Dekore



Ahorn Schlicht

0102 FH




Charles

0538 FH




Tosca

0269 FH




Weiß

0085 FH



Birkengrau

0741 FH




Warmgrau Dunkel

0755 FH



Graphitgrau

0077 FH



Eisblau

0706 FH



Lamar

0023 FH

Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit. Weitere Dekore auf bettenmalsch.com

Funktionale und wohnliche Pflegebetten



IMPULSE Edition 400 LR

**Mobiles Niedrigpflegebett
mit 100 mm Doppellaufrollen**

Das Pflegebett IMPULSE in der Edition 400 LR vereint Mobilität und Komfort. 100 mm Doppellaufrollen und Zentralbremse sowie ein großer Verstellbereich von 25 - 82 cm ermöglichen Flexibilität im Pflegealltag und machen dieses Pflegebett zum perfekten Allrounder.

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 25 - 82 cm
- Niedrigbett zur Sturzprophylaxe
- 4-geteilte ABS-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Bettfronten und Holzdekore individualisierbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung
- vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter kopfseitig



Komfort-Sitzposition



Ausführung mit schwenkbarem, geteilten
Seitengitter



IMPULSE Edition 500

Ultra-Niedrigpflegebett zur optimalen Sturzprophylaxe

Das IMPULSE Edition 500 bietet maximale Sturzprophylaxe ohne zusätzliche Sicherungselemente bei uneingeschränkter Funktionalität. Mit einer Liegeflächenhöhe von nur 15 cm in der untersten Position besteht beim Herausrollen nahezu kein Verletzungspotential.

Das Ultra-Niedrigpflegebett ist von 15 bis 75 cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar. Die Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Position sowie die bewährte Komfort-Sitzposition gehören zu den Grundfunktionalitäten.

15 cm Bodenhöhe –
Erweiterte Sturzprophylaxe

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 15 - 75 cm
- Ultra-Niedrigbett zur erweiterten Sturzprophylaxe
- 4-geteilte Metallgitter-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Bettfronten und Holzdekore individualisierbar
- achsweise Bremse



Schwerlastbett –
300 kg sichere Arbeitslast

IMPULSE Edition XL

Schwerlast-Pflegebett

Das IMPULSE Edition XL ist mit einer sicheren Arbeitslast von 300 kg höchsten Anforderungen gewachsen. Die robuste Bauweise mit verstärkter Konstruktion und Schwerlast-Antriebsset sind für ein Bewohnergewicht von bis zu 250 kg ausgelegt. Die 100 mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse ermöglichen sichere Mobilität und einen stabilen Stand.

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 33 - 83 cm
- 300 kg sichere Arbeitslast
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- Bettfronten und Holzdekor individualisierbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung
- stabile, schwenkbare Aluminium-Seitengitter



Das Pflegebett für gehobene Ansprüche

AURA

Ob im klassischen Holzdekor oder als modernes Polsterbett mit Ledersteppung: das preisgekrönte Niedrigpflegebett AURA bietet formschönes Design in Verbindung mit höchster Funktionalität. Die verdeckten Laufrollen mit Zentralbremse begünstigen den äußerst wohnlichen Charakter.

Dargestellte Konfiguration:

- Designvariante „Loft“
- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 25 - 82 cm
- Niedrigpflegebett zur Sturzprophylaxe
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Zentralbremse
- Individualisierung durch vielfältige Leder- und Stoffauswahl möglich



Das Pflegebett AURA ist auch in klassischer Holzoptik und vielfältigen Dekorvarianten erhältlich.



IMPULSE KL-M Edition 200-W

Robustes, mechanisches Pflegebett im wohnlichen Charme

Speziell für die Psychiatrie entwickelt, bietet das IMPULSE KL-M in der Edition 200-W wohnlichen Komfort ohne elektrische Bauteile oder Kabel. Der bewusste Verzicht auf werkzeuglos entnehmbare Komponenten ermöglicht einen hohen Sicherheitsstandard für Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern.

Bettfronten und Holzdekor
individualisierbar

Die Edition 200-W des IMPULSE KL-M ist neben der Ausführung mit durchgehenden Seitengittern optional mit schwenkbaren, geteilten Seitengittern erhältlich.

① Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 20,
Auswahl Bettfronten: Seite 18



Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- robuste Ausführung mit 250 kg sicherer Arbeitslast
- Fixierbügel an der Liegefläche
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- Zentralbremse
- durchgehende Seitengitter, nicht abnehmbar



Wohnraumbett RENA

RENA Edition 300

Mit den äußerst wohntonigen Bettfronten findet das Wohnraumbett RENA Edition 300 besonders in Wohngruppen und in der leichten Therapie Anwendung und ist auch als Besucherbett ideal einsetzbar. Das Bett verfügt über eine zweigeteilte Metallgitter-Liegefläche und ist aufgrund der verdeckten Laufrollen leicht zu manövrieren. Die sehr wohntonige Optik des Bettes steigert das Wohlbefinden von Patient*innen.

Dargestellte Konfiguration:

- verdeckte Laufrollen mit achweiser Bremse
- stabile Gesamtkonstruktion
- Bettverlängerung um 10/20 cm (optional)
- fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Rückenlehne anstellbar
- freie Dekorauswahl



Das Wohnraumbett RENA Edition 300 ist mit einem Bettkastenbeschlag ausgestattet und wird zerlegt angeliefert.



RENA Edition 100

Das robuste, einteilige Wohnraumbett RENA 100 eignet sich besonders für sensible Bereiche in der Psychiatrie. Bett und Liegefläche bestehen aus fest verbundenen, stabilen Hartfaserplatten. Zur besseren Belüftung der Matratze ist die Liegefläche mit einem Lochraster versehen.

Dargestellte Konfiguration:

- einteiliger Gesamtaufbau für maximale Stabilität
- Liegefläche aus gelochter Hartfaserplatte

Das Wohnraumbett RENA Edition 100 wird komplett montiert angeliefert und ist nicht zerlegbar. Die Editionen 200 und 220 sind mit einem Bettkastenbeschlag ausgestattet und werden zerlegt angeliefert.



RENA Edition 200

Besucher-Bett/leichte Therapie

Die klassische Konstruktion des Wohnraumbettes bietet eine hohe Stabilität und Standfestigkeit. Ausgestattet mit einer fest verschraubten, 2-geteilten Metallgitter-Liegefläche ist die mechanische Verstellung der Rückenlehne mittels Feinrastbeschlag möglich. Das RENA ist optional in zahlreichen Holzdekoren konfigurierbar.

Dargestellte Konfiguration:

- stabile Gesamtkonstruktion, Bettkastenbeschlag
- fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Rückenlehne anstellbar
- freie Dekorauswahl



RENA Edition 220

Besucher-Bett/leichte Therapie

In der Edition 220 verfügt das RENA über eine statische Liegefläche ohne Verstellmöglichkeiten. Die äußerst robuste Ausführung des Wohnraumbettes wird ab Werk zerlegt angeliefert. Die Liegefläche wird bei der Montage fest verschraubt.

Dargestellte Konfiguration:

- einteiliger Gesamtaufbau, Bettkastenbeschlag
- Liegefläche aus gelochter Hartfaserplatte



Bettfronten

Wählen Sie aus verschiedenen Designs die geeignete Bettfront*. Attraktive Holzreplikationen ermöglichen kreativen Freiraum in der Ausgestaltung Ihres Projektes.

Serie V408 ²



Serie V420 ²



geeignet für schwenkbares Seitengitter (GS) und vertikales Seitengitter (VGS/EVGS)

Serie V455 ¹



Handlauf
abgerundet



geeignet für durchgehendes Seitengitter (DS), schwenkbares Seitengitter (GS) und vertikales Seitengitter (VGS/EVGS)

Serie V470 ¹



Handlauf
abgerundet



geeignet für durchgehendes Seitengitter (DS), schwenkbares Seitengitter (GS) und vertikales Seitengitter (VGS/EVGS)

Serie V480 ¹



Handlauf
flach



geeignet für durchgehendes Seitengitter (DS), schwenkbares Seitengitter (GS) und vertikales Seitengitter (VGS/EVGS)

Holzreplikationen

Bei der Dekorauswahl handelt es sich um Reproduktionen. Eine farbverbindliche Dekorauswahl ist nur am Originalmuster möglich. Sonderdekore sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.



Ahorn



Buche




Eiche hell



Eiche Sand



Nussbaum

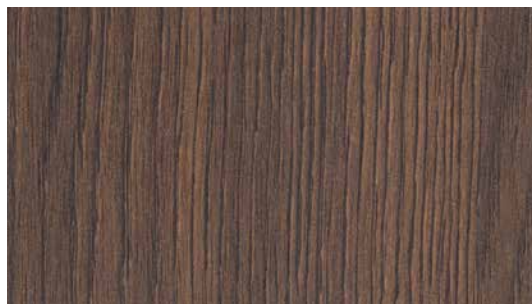

Eiche dunkel

Ausstattungen und Optionen wohnliche Pflegebetten

| | Edition 400 LR-P | Edition 420 LR-P | Edition 500 | Edition XL |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Niedrigposition / Einstiegsposition | 25 cm | 26 cm | 15 cm | 33 cm |
| Arbeitshöhe | 82 cm | 82 cm | 75 cm | 83 cm |
| Sturzprophylaxe | • | • | • | - |
| Transferposition | • | - | • | - |
| Komfort-Sitzposition | • | - | • | • |
| Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar) | • | - | • | • |
| CPR-Notabsenkung | o | o | - | o |
| Matratzenausgleich der Rückenlehne | • | • | • | • |
| Bettverlängerung 10 cm / 20 cm | • | • | • | o |
| Bettzeugablage | o | - | - | o |
| Laufrollen | 150 mm Doppelaufrollen | 150 mm Doppelaufrollen | 50 mm Doppelaufrollen | 100 mm Doppelaufrollen |
| Zentralbremse | • | • | • achsweise | • |
| Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS) | • | • | - | - |
| Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS) | o | o | - | • |
| Durchgehendes Seitengitter (DS) | o | o | o | o |
| Mobilisierungshilfe statisch, teleskopierbar | - | - | o | - |
| Antriebssystem mit Schutzkleinspannung | • | • | • | • |
| Handschalter mit Sperrfunktion | • | • | • | • |
| Fixierbügel an der Liegefläche | o | o | o | o |
| 2-geteilte Liegefläche | o | o | - | - |
| 4-geteilte Liegefläche | • | • | • | • |
| Komfort-Liegefläche | o | - | o | - |
| ABS-Liegefläche | o | o | o | - |
| Metallgitter-Liegefläche | • | • | • | - |
| Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt | o | o | o | • |
| Unterbettbeleuchtung | o | o | o | o |

• Standard o optional

Technische Angaben wohnliche Pflegebetten

| | Edition 400 LR-P | Edition 420 LR-P | Edition 500 | Edition XL |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Maße und Gewichte | | | | |
| Liegefläche | 90×200 cm | 90×200 cm | 90×200 cm | 100×200 cm |
| Außenmaße | 100×206 cm | 107×218 cm | 107×218 cm | 110×206 cm |
| Sichere Arbeitslast | max. 225 kg | max. 200 kg | max. 200 kg | max. 300 kg |
| Unterfahrbarkeit | 15 cm | 17 cm | - | 13 cm |
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg | ca. 135 kg | ca. 126 kg | ca. 150 kg |

| | AURA | KL-M Edt. 200-W | RENA 300 | RENA 100/200/220 |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Niedrigposition / Einstiegsposition | 25 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Arbeitshöhe | 82 cm | 80 cm | - | - |
| Sturzprophylaxe | • | - | - | - |
| Transferposition | • | - | - | - |
| Komfort-Sitzposition | • | - | - | - |
| Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar) | • | - | - | - |
| CPR-Notabsenkung | ◦ | - | - | - |
| Matratzenausgleich der Rückenlehne | • | • | • | - |
| Bettverlängerung 10 cm/20 cm | • | - | ◦ | - |
| Bettzeugablage | ◦ | ◦ | - | - |
| Laufrollen | 50 mm Doppelaufrollen | 125 mm Einzelaufrollen | 50 mm Doppelaufrollen | - |
| Zentralbremse | • | • | - | - |
| Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS) | • | - | - | - |
| Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS) | - | - | - | - |
| Durchgehendes Seitengitter (DS) | - | • | - | - |
| Mobilisierungshilfe statisch, teleskopierbar | - | - | - | - |
| Antriebssystem mit Schutzkleinspannung | • | • | - | - |
| Handscharter mit Sperrfunktion | • | - | - | - |
| Fixierbügel an der Liegefläche | ◦ | • | ◦ | -/◦/- |
| 2-geteilte Liegefläche | - | - | • | -/•/- |
| 4-geteilte Liegefläche | • | • | - | - |
| Komfort-Liegefläche | ◦ | - | - | - |
| ABS-Liegefläche | • | ◦ | - | - |
| Metallgitter-Liegefläche | ◦ | ◦ | • | -/•/- |
| Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt | ◦ | ◦ | - | - |
| Unterbettbeleuchtung | ◦ | - | - | - |

• Standard ◦ optional

| | AURA | KL-M Edt. 200-W | RENA 300 | RENA 100/200/220 |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Maße und Gewichte | | | | |
| Liegefläche | 90×200 cm | 90×200 cm | 90×200 cm | 90×200 cm |
| Außenmaße | 103×206 cm | 107×218 cm | 107×218 cm | 107×218 cm |
| Sichere Arbeitslast | max. 225 kg | max. 250 kg | max. 220 kg | |
| Unterfahrbarkeit | 13 cm | 13 cm | - | |
| Gesamtgewicht | ca. 130 kg | ca. 130 kg | ca. 103 kg | |

Auszug aus dem Zubehörsortiment



Aufrichter



Infusionsstativ
gerade Kunststoff/Edelstahl
gebogen Kunststoff/Edelstahl



Urinflaschenkorb
für DIN-Normschiene



Nachtschrank WK I-P



Nachtschrank WK I



Nachtschrank WK III-P



Nachtschrank WI



Nachtschrank WI N



Nachtschrank WI II



Server WXL

Unser umfangreiches Zubehör- und Möbelsortiment finden Sie in gesonderten Katalogen.

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post. Alternativ stehen die PDF-Dateien zum Download unter de.bettenmalsch.com/download bereit.

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

