

Psychiatriebetten







INHALT

Mechanische Klinikbetten.	4
Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten	7
Technische Angaben mechanische Klinikbetten	7
Vollmotorisches Klinikbett	8
Ausstattungen und Optionen	9
Technische Angaben	9
Bettfronten	10
Holzreplikationen und Dekore	11
Funktionale und wohnliche Pflegebetten	12
Das Pflegebett für gehobene Ansprüche	15
Wohnraumbett RENA	17
Bettfronten	18
Holzreplikationen	19
Ausstattungen und Optionen wohnliche Pflegebetten	20
Technische Angaben wohnliche Pflegebetten	20
Auszug aus dem Zubehörsortiment	22

Mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M Edition 300-P

Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P ist speziell auf die hohen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit in der Psychiatrie ausgelegt. Mit speziell gesicherten Komponenten und einer mechanischen Höhenverstellung ist das massive Spezialbett den täglichen Herausforderungen in psychiatrischen Einrichtungen bestens gewachsen. In Abhängigkeit des Einsatzzwecks bestehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. In der Edition 300-P verfügt das IMPULSE KL-M über eine axiale Liegeflächenschwenkung in die Trendelenburg- bzw. Anti-Trendelenburglagerung. Die beidseitig fest montierte ISO-Normschiene mit Fixieraster ermöglicht die Aufnahme von Zubehör und dient gleichermaßen der Befestigung von Fixiergurten.

❶ Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 7
Auswahl Bettfronten: Seite 10

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40-80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung





Fixierbügel an der Liegefläche

Die Komfort-Sitzposition wirkt positiv auf die Vitalfunktionen und fördert die Kommunikation.



Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 300-P ist optional mit werkzeuglos montierbaren, durchgehenden Seitengittern erhältlich.



ISO-Normschiene mit Fixieraster zur Befestigung von Gurtsystemen und Zubehör



Integrierte Bettzeugablage



Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



150mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse und Richtungsfeststellung

IMPULSE KL-M Edition 200-P



Einfach höhenverstellbar


Das Klinikbett IMPULSE KL-M in der Edition 200-P ist eigens für den Einsatz in der Psychiatrie konstruiert. Die Verstellvarianten dieses mechanischen Klinikbettes beschränken sich auf die Höhenverstellung sowie, bei Konfiguration mit 4-geteilter Liegefläche, auf die selektive Verstellung von Rückenlehne, Oberschenkel- und Unterschenkelauflage.

Die beidseitig angebrachte ISO-Normschiene mit Fixieraster stellt auch bei der Edition 200-P eine praktische Zubehöraufnahme bereit, die gleichermaßen zur Befestigung von Fixiergurten geeignet ist. Die Konfiguration der einzelnen Komponenten ist individuell möglich.

① Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 7
Auswahl Bettfronten: Seite 10



Werkzeuglos montierbare, durchgehende Seitengitter (optional)

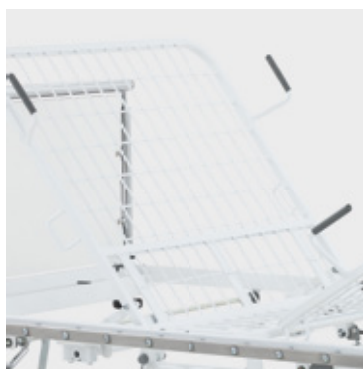

Fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche mit Fixierbügeln



125 mm Einzelaufrollen mit Zentralbremse

Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- verstärkte Bettfronten mit reduzierten Spaltmaßen
- Zentralbremse

Ausstattungen und Optionen mechanische Klinikbetten

IMPULSE KL-M	Edition 300-P	Edition 200-P
Einstiegshöhe	40 cm	40 cm
Arbeitshöhe	80 cm	80 cm
Komfort-Sitzposition	•	-
Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position	•	-
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•
Bettverlängerung 10 cm / 20 cm	•	•
Bettzeugablage	•	•
Laufrollen	150 mm Doppelaufrollen	125 mm Einzelaufrollen
Zentralbremse	•	•
Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS)	○	○
Werkzeuglos montierbares, durchgehendes Seitengitter (DS)	○	○
2-geteilte Liegefläche	○	○
4-geteilte Liegefläche	•	•
ABS-Liegefläche	○	○
Metallgitter-Liegefläche, fest verschweißt	•	•
Bettfronten werkzeuglos entnehmbar	○	○
Fixierbügel an der Liegefläche	•	•
ISO-Normschiene mit Fixierraster beidseitig	•	•
Entnehmbares Höhenpedal mit Sicherung	○	○

• Standard ○ optional

Abweichungen vom Standardumfang sind kundenindividuell möglich.

Technische Angaben mechanische Klinikbetten

Maße und Gewichte	Edition 300-P	Edition 200-P
Liegefläche	90x200 cm	90x200 cm
Außenmaße	107x218 cm	107x218 cm
Sichere Arbeitslast	max. 250 kg	max. 250 kg
Unterfahrbarkeit	13 cm	13 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg

Vollmotorisches Klinikbett

IMPULSE KL Edition 400-P

Klinikbett zur Sturzprophylaxe

Die Psychiatrieausführung des bewährten Niedrig-Klinikbetts IMPULSE KL ermöglicht Sturzprophylaxe im psychiatrischen Umfeld. Der stabile Allrounder überzeugt durch flexible Einsatzmöglichkeiten und Beständigkeit der hochwertigen Materialien.

Mit einer Bodenhöhe von nur 30cm in der Niedrigposition bringt das IMPULSE KL in der Edition 400-P mehr Sicherheit für Patientinnen, Patienten und Pflegepersonal. Das Niedrig-Klinikbett kann sturzgefährdeten Risikogruppen eine Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen bieten.

❶ Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 9
Auswahl Bettfronten: Seite 10



Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 30-83 cm
- 30cm Niedrigposition zur Sturzprophylaxe
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Fixierbügel an der Liegefläche
- ISO-Normschiene mit Fixieraster beidseitig
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- ausziehbare Bettzeugablage
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung

Ausstattungen und Optionen


IMPULSE KL	Edition 400-P
Niedrigposition	30 cm
Arbeitshöhe	83 cm
Sturzprophylaxe	•
Transferposition	•
Komfort-Sitzposition	•
Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar)	•
CPR-Notabsenkung	•
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•
Bettverlängerung 10 cm / 20 cm	•
Bettzeugablage	•
Doppellaufrollen	150 mm
5. Rolle	◦
Zentralbremse mit Richtungsfeststellung	•
Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS)	◦
Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS)	◦
Werkzeuglos montierbares, durchgehendes Seitengitter (DS)	◦
Entnehmbare Patientenhandschalter	◦
Zusätzlicher horizontaler Patientenhandschalter	◦
2-geteilte Liegefläche	◦
4-geteilte Liegefläche	•
ABS-Liegefläche	◦
Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt	•
Bettfronten werkzeuglos entnehmbar	◦
Bettfronten fest verschraubt	•
Bed-Exit System	◦
Bremsalarm	◦
Unterbettbeleuchtung	◦

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

Maße und Gewichte	Edition 400-P
Liegefläche	90x200 cm
Außenmaße	100x206 cm
Sichere Arbeitslast	max. 250 kg
Unterfahrbarkeit	13 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg


Bettfronten

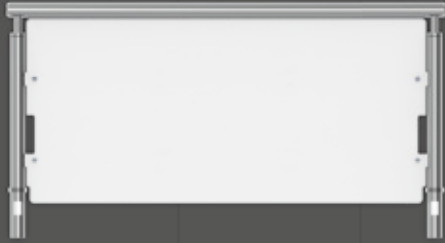

V1120 (verchromt, entnehmbar)

V1121 (verchromt, verschraubt)


- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

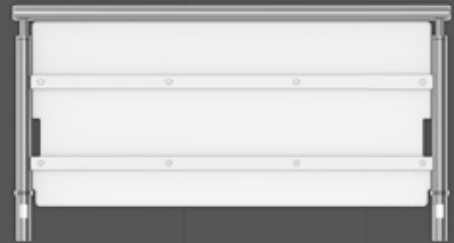

V1140 (verchromt, entnehmbar)

V1141 (verchromt, verschraubt)


- Handlauf Rundrohr
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

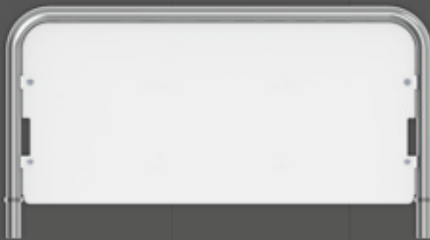

V2120 (verchromt, entnehmbar)

V2121 (verchromt, verschraubt)

- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

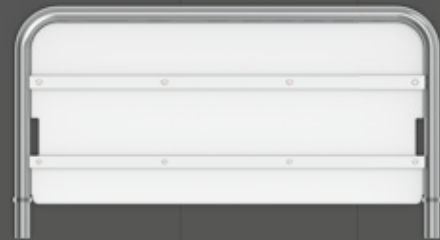


V2140 (verchromt, entnehmbar)

V2141 (verchromt, verschraubt)


- Handlauf Rundrohr mit abgerundeten Ecken
- hohe Ausführung ohne umlaufenden Spalt
- außenliegende Verstärkung mit Stahlschiene
- seitliche Ausnehmungen in der Füllplatte zur Befestigung der anbaubaren durchgehenden Seitengitter (optional)

Holzreplikationen und Dekore

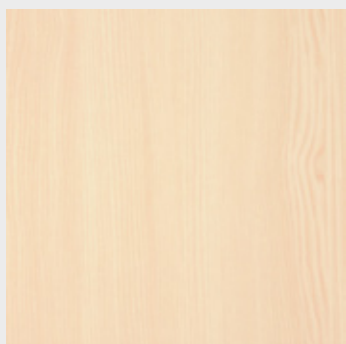


Ahorn Schlicht

0102 FH

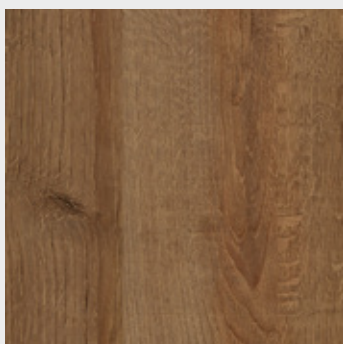


Charles

0538 FH

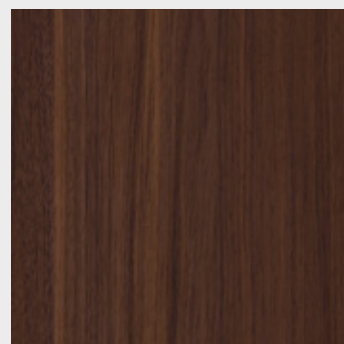


Tosca

0269 FH




Weiß

0085 FH




Birkengrau

0741 FH




Warmgrau Dunkel

0755 FH



Graphitgrau

0077 FH



Eisblau

0706 FH



Lamar

0023 FH

Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit. Weitere Dekore auf [bettenmalsch.com](https://www.bettenmalsch.com)

Funktionale und wohnliche Pflegebetten



IMPULSE Edition 400 LR

**Mobiles Niedrigpflegebett
mit 100 mm Doppelaufrollen**

Das Pflegebett IMPULSE in der Edition 400 LR vereint Mobilität und Komfort. 100 mm Doppelaufrollen und Zentralbremse sowie ein großer Verstellbereich von 25 - 82 cm ermöglichen Flexibilität im Pflegealltag und machen dieses Pflegebett zum perfekten Allrounder.

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 25 - 82 cm
- Niedrigbett zur Sturzprophylaxe
- 4-geteilte ABS-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Bettfronten und Holzdekore individualisierbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung
- vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter kopfseitig



Komfort-Sitzposition



Ausführung mit schwenkbarem, geteiltem
Seitengitter



IMPULSE Edition 500

Ultra-Niedrigpflegebett zur optimalen Sturzprophylaxe

15 cm Bodenhöhe –
Erweiterte Sturzprophylaxe

Das IMPULSE Edition 500 bietet maximale Sturzprophylaxe ohne zusätzliche Sicherungselemente bei uneingeschränkter Funktionalität. Mit einer Liegeflächenhöhe von nur 15cm in der untersten Position besteht beim Herausrollen nahezu kein Verletzungspotential.

Das Ultra-Niedrigpflegebett ist von 15 bis 75 cm stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar. Die Trendelenburg-/Antitrendelenburg-Position sowie die bewährte Komfort-Sitzposition gehören zu den Grundfunktionalitäten.

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 15 - 75 cm
- Ultra-Niedrigbett zur erweiterten Sturzprophylaxe
- 4-geteilte Metallgitter-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Bettfronten und Holzdekore individualisierbar
- achsweise Bremse



IMPULSE Edition 420 LR

Basis-Pflegebett

Mit nur 27 cm Bodenhöhe bietet die 3-motorige Basisvariante eine wirtschaftliche Alternative zur Edition 400LR. Bauartbedingt verfügt das Bett über keine axiale Liegeflächenschwenkung.

Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 27 - 82 cm
- Niedrigbett zur Sturzprophylaxe
- integrierte Bettverlängerung
- Bettfronten und Holzdekore individualisierbar
- Zentralbremse
- schwenkbares, geteiltes Seitengitter kopfseitig



IMPULSE Edition XL

Schwerlast-Pflegebett

Das IMPULSE Edition XL ist mit einer sicheren Arbeitslast von 300kg höchsten Anforderungen gewachsen. Die robuste Bauweise mit verstärkter Konstruktion und Schwerlast-Antriebsset sind für ein Bewohnergewicht von bis zu 250kg ausgelegt. Die 100mm Doppelaufrollen mit Zentralbremse ermöglichen sichere Mobilität und einen stabilen Stand.

Schwerlastbett –
300kg sichere Arbeitslast



Dargestellte Konfiguration:

- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 33-83 cm
- 300 kg sichere Arbeitslast
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- Bettfronten und Holzdekor individualisierbar
- Zentralbremse mit Richtungsfeststellung
- stabile, schwenkbare Aluminium-Seitengitter



Das Pflegebett für gehobene Ansprüche

AURA

Ob im klassischen Holzdekor oder als modernes Polsterbett mit Ledersteppung: das preisgekrönte Niedrigpflegebett AURA bietet formschönes Design in Verbindung mit höchster Funktionalität. Die verdeckten Laufrollen mit Zentralbremse begünstigen den äußerst wohnlichen Charakter.

Dargestellte Konfiguration:

- Designvariante „Loft“
- Verstellfunktionen elektrisch
- Höhenverstellung 25 - 82 cm
- Niedrigpflegebett zur Sturzprophylaxe
- Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Position
- Komfort-Sitzposition
- integrierte Bettverlängerung
- Zentralbremse
- Individualisierung durch vielfältige Leder- und Stoffauswahl möglich



AURA ist auch in klassischer Holzoptik und vielfältigen Dekorvarianten erhältlich.





IMPULSE KL-M Edition 200-W

Robustes, mechanisches Pflegebett im wohnlichen Charme

Speziell für die Psychiatrie entwickelt, bietet das IMPULSE KL-M in der Edition 200-W wohnlichen Komfort ohne elektrische Bauteile oder Kabel. Der bewusste Verzicht auf werkzeuglos entnehmbare Komponenten ermöglicht einen hohen Sicherheitsstandard für Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern.

Die Edition 200-W des IMPULSE KL-M ist neben der Ausführung mit durchgehenden Seitengittern optional mit schwenkbaren, geteilten Seitengittern erhältlich.

Bettfronten und Holzdekor individualisierbar

① Übersicht Ausstattungen & Optionen: Seite 20,
Auswahl Bettfronten: Seite 18



Dargestellte Konfiguration:

- hydraulische Höhenverstellung von 40 - 80 cm
- mechanische Liegeflächenverstellung
- 4-geteilte, fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- robuste Ausführung mit 250 kg sicherer Arbeitslast
- Fixierbügel an der Liegefläche
- Bettfronten nicht werkzeuglos entnehmbar
- Zentralbremse
- durchgehende Seitengitter, nicht abnehmbar

Wohnraumbett RENA

RENA Edition 100

Das robuste, einteilige Wohnraumbett RENA 100 eignet sich besonders für sensible Bereiche in der Psychiatrie. Bett und Liegefläche bestehen aus fest verbundenen, stabilen Hartfaserplatten. Zur besseren Belüftung der Matratze ist die Liegefläche mit einem Lochraster versehen.

Dargestellte Konfiguration:

- einteiliger Gesamtaufbau für maximale Stabilität
- Liegefläche aus gelochter Hartfaserplatte

RENA Betten werden i.d.R. komplett montiert angeliefert und sind nicht zerlegbar. Optional sind die RENA-Editionen 200/220 mit einem Bettkastenbeschlag erhältlich und zerlegt lieferbar.



RENA Edition 200

Die klassische Konstruktion des Wohnraumbettes bietet eine hohe Stabilität und beste Standfestigkeit. Ausgestattet mit einer fest verschraubten, 2-geteilten Metallgitter-Liegefläche ist die mechanische Verstellung der Rückenlehne mittels Feinrastbeschlag möglich. Das RENA ist optional in zahlreichen Holzdekoren konfigurierbar.

Dargestellte Konfiguration:

- stabile, fest verschraubte Gesamtkonstruktion
- fest verschweißte Metallgitter-Liegefläche
- Rückenlehne anstellbar
- freie Dekorauswahl

RENA Edition 220

In der Edition 220 verfügt das RENA über eine statische Liegefläche ohne Verstellmöglichkeiten. Die äußerst robuste Ausführung des Wohnraumbettes ist ab Werk komplett montiert und nicht zerlegbar. Diese stabile Ausführung findet insbesondere in sensiblen Bereichen der Psychiatrie Anwendung.

Dargestellte Konfiguration:

- einteiliger Gesamtaufbau für maximale Stabilität
- Liegefläche aus gelochter Hartfaserplatte



Bettfronten

Wählen Sie aus 6 verschiedenen Designs die geeignete Bettfront*. Attraktive Holzreplikationen ermöglichen kreativen Freiraum in der Ausgestaltung Ihres Projektes.

Serie V450



Serie V470



Serie V480



Serie V490



Serie V408



Serie V500



* nicht für RENA und AURA „Loft“


Holzreplikationen

Bei der Dekorauswahl handelt es sich um Reproduktionen. Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit.



Buche gedämpft

R24034

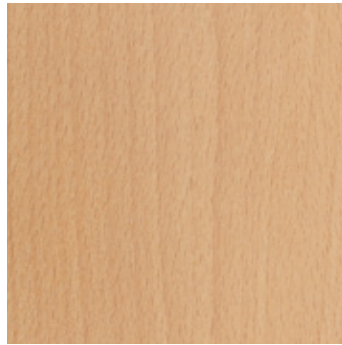


Altmühlbuche

R24006



Bergahorn

R27024

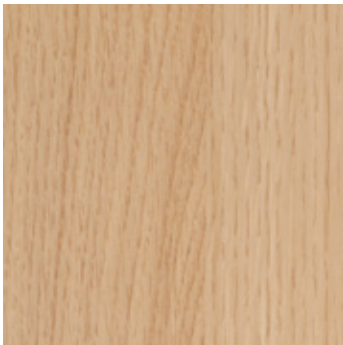

Eiche Milano

R20095




Sonoma Eiche hell

R20128




Sonoma Eiche trüffel

R20031

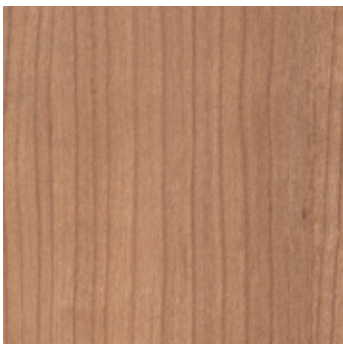


Kirsche Havanna

R42006

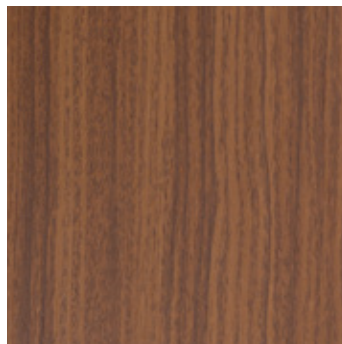

Nussbaum Standard

R30001

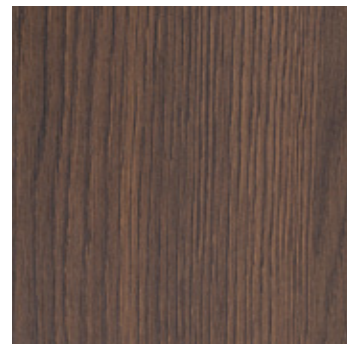

Springfield Oak dunkel

R20234

Ausstattungen und Optionen wohnliche Pflegebetten

	Edition 400 LR-P	Edition 420 LR-P	Edition 500	Edition XL
Niedrigposition/ Einstiegsposition	25 cm	26 cm	15 cm	33 cm
Arbeitshöhe	82 cm	82 cm	75 cm	83 cm
Sturzprophylaxe	•	•	•	-
Transferposition	•	-	•	-
Komfort-Sitzposition	•	-	•	•
Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar)	•	-	•	•
CPR-Notabsenkung	◦	◦	-	◦
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•	•	•
Bettverlängerung 10 cm/20 cm	•	•	•	◦
Bettzeugablage	◦	-	-	◦
Laufrollen	150 mm Doppellaufrollen	150 mm Doppellaufrollen	50 mm Doppellaufrollen	100 mm Doppellaufrollen
Zentralbremse	•	•	• achsweise	•
Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS)	•	•	-	-
Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS)	◦	◦	-	•
Durchgehendes Seitengitter (DS)	◦	◦	◦	◦
Mobilisierungshilfe statisch, teleskopierbar	-	-	◦	-
Antriebssystem mit Schutzkleinspannung	•	•	•	•
Handscharter mit Sperrfunktion	•	•	•	•
Fixierbügel an der Liegefläche	◦	◦	◦	◦
2-geteilte Liegefläche	◦	◦	-	-
4-geteilte Liegefläche	•	•	•	•
Komfort-Liegefläche	◦	-	◦	-
ABS-Liegefläche	◦	◦	◦	-
Metallgitter-Liegefläche	•	•	•	-
Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt	◦	◦	◦	•
Unterbettbeleuchtung	◦	◦	◦	◦

• Standard ◦ optional

Technische Angaben wohnliche Pflegebetten


	Edition 400 LR-P	Edition 420 LR-P	Edition 500	Edition XL
Maße und Gewichte				
Liegefläche	90x200cm	90x200cm	90x200cm	100x200cm
Außenmaße	100x206cm	107x218cm	107x218cm	110x206cm
Sichere Arbeitslast	max. 225 kg	max. 200 kg	max. 200 kg	max. 300 kg
Unterfahrbarkeit	15 cm	17 cm	-	13 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg	ca. 135 kg	ca. 126 kg	ca. 150 kg

	AURA	KL-M Edt. 200-W	RENA 100/200/220
Niedrigposition/Einstiegsposition	25 cm	40 cm	40 cm
Arbeitshöhe	82 cm	80 cm	-
Sturzprophylaxe	•	-	-
Transferposition	•	-	-
Komfort-Sitzposition	•	-	-
Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg-Position (sperrbar)	•	-	-
CPR-Notabsenkung	○	-	-
Matratzenausgleich der Rückenlehne	•	•	-
Bettverlängerung 10 cm/20 cm	•	-	-
Bettzeugablage	○	○	-
Laufrollen	50 mm Doppelaufrollen	125 mm Einzelaufrollen	-
Zentralbremse	•	•	-
Vertikal versenkbares, geteiltes Seitengitter mit Einhandbedienung (EVGS)	•	-	-
Schwenkbares, geteiltes Seitengitter (GS)	-	-	-
Durchgehendes Seitengitter (DS)	-	•	-
Mobilisierungshilfe statisch, teleskopierbar	-	-	-
Antriebssystem mit Schutzkleinspannung	•	•	-
Handschalter mit Sperrfunktion	•	-	-
Fixierbügel an der Liegefläche	○	•	-/○/-
2-geteilte Liegefläche	-	-	-/•/-
4-geteilte Liegefläche	•	•	-
Komfort-Liegefläche	○	-	-
ABS-Liegefläche	•	○	-
Metallgitter-Liegefläche	○	○	-/•/-
Metallgitter-Liegefläche fest verschweißt	○	○	-
Unterbettbeleuchtung	○	-	-

• Standard ○ optional

	AURA	KL-M Edt. 200-W	RENA 100/200/220
Maße und Gewichte			
Liegefläche	90x200 cm	90x200 cm	90x200 cm
Außenmaße	103x206 cm	107x218 cm	107x218 cm
Sichere Arbeitslast	max. 225 kg	max. 250 kg	
Unterfahrbarkeit	13 cm	13 cm	
Gesamtgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg	

Auszug aus dem Zubehörsortiment

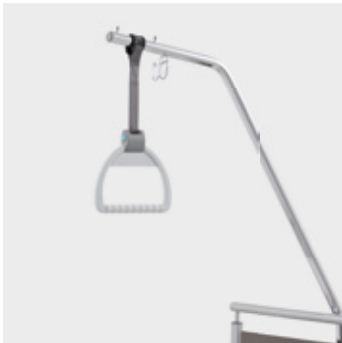

Aufrichter



Infusionsstativ
gerade Kunststoff/Edelstahl
gebogen Kunststoff/Edelstahl



Urinflaschenkorb
für DIN-Normschiene



Nachtschrank WKI-P



Nachtschrank WKI



Nachtschrank WKIII-P



Nachtschrank WI



Nachtschrank WI N



Nachtschrank WIll



Server WXL

Unser umfangreiches Zubehör- und Möbelsortiment finden Sie in gesonderten Katalogen.

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post. Alternativ stehen die PDF-Dateien zum Download unter de.bettenmalsch.com/download bereit.

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

